



 **Ultralehký**

PD300-ULTRALIGHT PODOSCOPE APARATUS
PRO ANALÝZU ROSTLIN NA NOHY

VAROVÁNÍ	Strana 4
KOMPONENTY PODOSCOPE	Strana 5
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	Pag. 6
VŠEOBECNÉ POKYNY	Pag. 6
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	Pag. 7
SYMBOL.	Pag. 7

Děkujeme, že jste si vybrali produkty NAMRØL.

Zařízení, které jste si zakoupili, bylo navrženo a vyrobeno tak, aby vyhovovalo vašim současným potřebám a díky své vestavěné všestrannosti a přizpůsobivosti také vašim budoucím potřebám.

Před použitím tohoto přístroje je dobré si pečlivě přečíst tuto příručku a bezpečně ji uschovat.

To vám umožní plně porozumět jednotce, umožní vám co nejlépe využít její potenciál a udržet si špičkový výkon, bezpečnost a spolehlivost po celou dobu její životnosti.

A ať už nastanou jakékoli okolnosti, můžete se spolehnout na profesionalitu vašeho NAMRØL prodejce, odbornost jeho techniků a naše spolehlivost jako konstruktérů.

Guillermo Lorman, SL

NAMRØL

Použití přístroje je omezeno na pedikéry pro vytváření šablon při konzultacích a zákrocích týkajících se patologií nohou.

Zařízení je navrženo a vyrobeno pro použití při výrobě protetiky jakéhokoli druhu a patologie.

Zařízení nelze použít, pokud jsou v něm směsi hořlavých a vlhkých látek

Nepřekračujte zatížení uvedené v části „technické specifikace“.

Neodstraňujte štítky na žádné jednotce/křesle. Pokud se zhorší, vyměňte je.

Zdroj napájení:

Ujistěte se, že je napájecí zdroj jednotky/křesla napájen pomocí externího diferenciálního vypínače s proudovou zatížitelností 16A a prahovou hodnotou 10mA.


Ujistěte se, že napájení jednotky je oddělené.


Ujistěte se, že napájecí zdroj jednotky je vybaven účinným uzemňovacím systémem a že kabeláž odpovídá platným normám.

klima:

V extrémních podmínkách (teplo, chlad, vlhkost) je vhodné mezi vybalením zařízení a prvním použitím nechat uplynout několik hodin. Toto opatření poskytuje čas potřebný k odstranění jakékoli kondenzace, která se mohla vytvořit uvnitř obalu.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 <p>Žádné škodlivé faktory v našich produktech. Můžete použít na základě místních zákonů.</p>	<p>Soulad se Směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a následným dodatkem 2007/47/EC 14/06/93 Class 1, nabízející maximální bezpečnost uživatele, pacienta a pacienta</p> <p>envir</p>
--	--

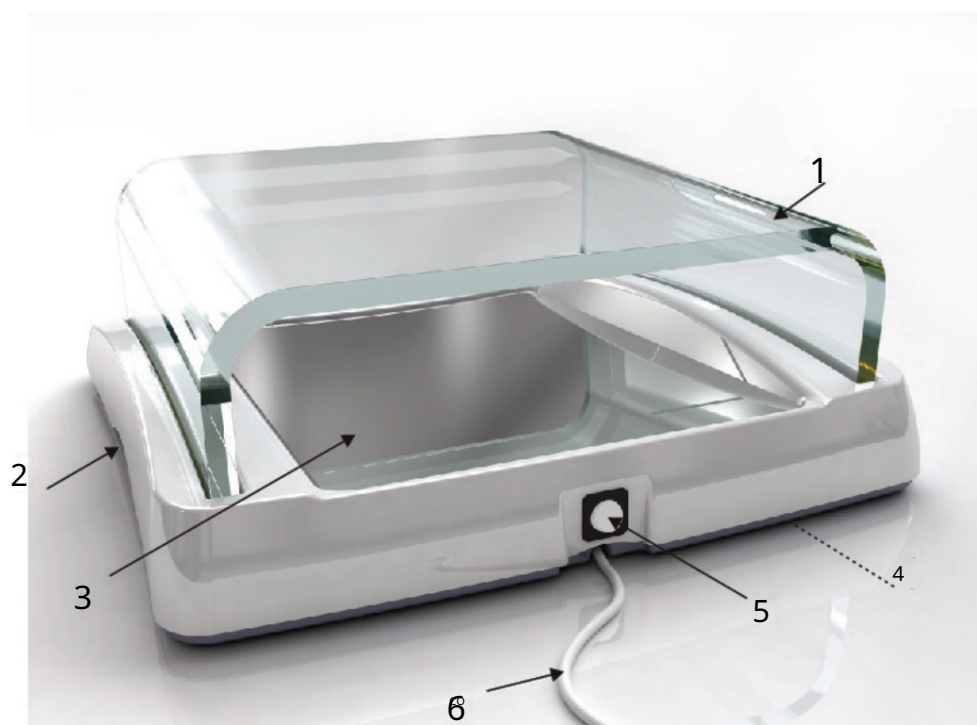

1.- Polykarbonátová základna.

2.- Rukojeť na přenášení.

3.- Zrcátko s ABS základnou.

4.- Identifikační značka CE.

5.- Zapnutí/vypnutí.

6.- Napájecí kabel.

K čištění a dezinfekci vnějších povrchů stroje (plastové, lakované a čalouněné části) používejte běžné komerčně dostupné dezinfekční prostředky a zkontrolujte, zda uvedené účinné látky nepřekračují maximální koncentrace uvedené níže:

- Glutaraldehyd 2%:10%
- Ethanol 96%:40%
- Formaldehyd: 0,01 %
- Glyoxal: 0,15 %
- Propanol:35%

VAROVÁNÍ!

Nepřekračujte uvedené koncentrace. Nepoužívejte produkty obsahující alkohol, čpavek, abrazivní látky nebo benzen. Dezinfikovaná místa otřete mokřým hadříkem (dezinfekční prostředky mohou napadnout povrchy, i když jsou zředěné).

Produkty aplikujte měkkým hadříkem navlhčeným dezinfekčním prostředkem: nestříkejte dezinfekční prostředek přímo na zařízení, protože by mohl proniknout do jednotky/křesla a ohrozit správnou funkci.








NAMRØL nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z nedodržování varování a pokynů obsažených v této příručce.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Udržujte povrch teflonu a rám neustále v čistotě, zabraňte hromadění organických usazenin v krytech.
- Absolutně se vyvarujte nalévání tekutin na základnu; v případě náhodného polití co nejdříve osušte.
- Plná shoda se směrnicí EEC 93/42 (Zdravotnické prostředky) zajišťuje maximální bezpečnost pro uživatele, pacienta a životní prostředí.

Zdroj napájení	230 Vca jednofázový /50Hz
Vstřebávání	0,15 A
Kapacita	180 kg/cm ²
Zachycení stopy.	Zelené světlo.
Zrcadlo pro zachycení stopy.	Polykarbonátová základna (bez skla)
Hmotnost	8 kg
Pracovní rozměry	380 mm x 400 mm
Rozměry	520 mm x 450 mm x 180 mm H.

SYMBOL

Střídavý proud	
Země	
Typ třídy 1	
Napětí (230 V)	
VAROVÁNÍ: dříve si přečtěte návod k obsluze použití	
Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/ EHS ze dne 14. 6. 93 a následná novela 2007/47/ ES třída 1.	
Služba zákaznické podpory (úkol, který má provádět pouze kvalifikovaný technický personál).	



www.namrol.com

C/ dels drets lidé, 17-19

Pol. Ind. Mas Alba

08870 Sitges (Barcelona-Španělsko).

Tel.: 0034 93 811 36 88

Fax: 0034 93 894 87 22

e-mail: info@namrol.com

www.namrol.com